

SafeShield

- MASCARILLAS -

FS-N95 Médica



FS-N95 Civil



Anti-fluido



Anti-bacterias



Filtro UV



Respirable



Hipoalergénico



FS-N95 Médica


- Producto de protección personal que es una barrera de contención primaria, protegiendo de agentes infecciosos al personal clínico y quirúrgico.
- El material filtra y retiene las partículas suspendidas en el ambiente.
- Recomendado para ser usado por personal médico en hospitales o lugares con altos niveles de infección.
- No usar en zonas industriales o en áreas donde corran gases anestésicos o vapores esterilizantes.



FS-N95 Civil

- Mascarilla diseñada para la protección del usuario, provee una sensación de seguridad y comodidad.
- El material filtra y retiene las partículas suspendidas en el ambiente.
- Recomendado para ser usado por el público en general en sus interacciones diarias, o en espacios donde haya sospecha de virus o bacterias en el ambiente.
- No usar en zonas industriales o en áreas donde corran gases anestésicos o vapores esterilizantes.

FS-N95 Médica

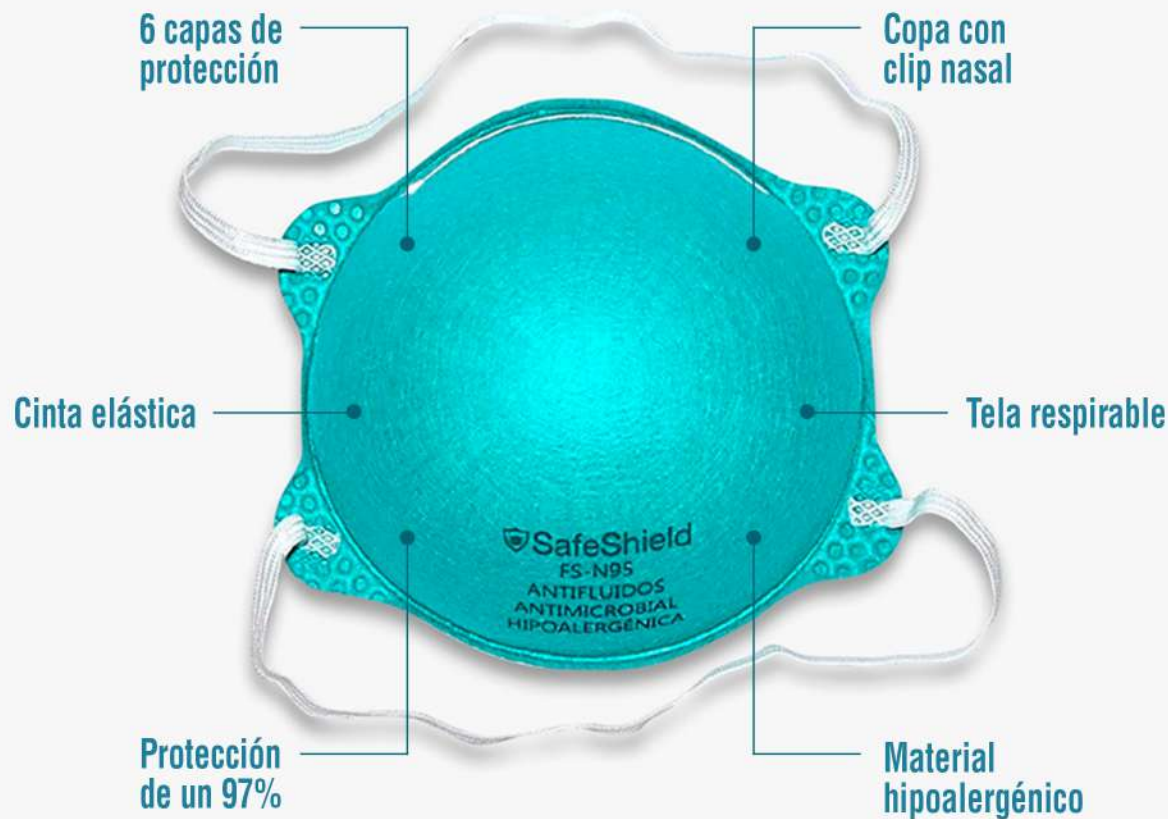

CAPA I

Filtro acrílico antibacterial

CAPA II

Filtro acrílico antilíquidos

CAPA III

Filtro acrílico antibacterial hipoalergénico



CAPA IV

Meltblown

CAPA V


Filtro acrílico antilíquidos

CAPA VI

Filtro acrílico antibacterial hipoalergénico

Posee 6 capas de tela no tejida con filamentos continuos de Polipropileno. Están, compuestas por poliamida y poliéster

FS-N95 Civil

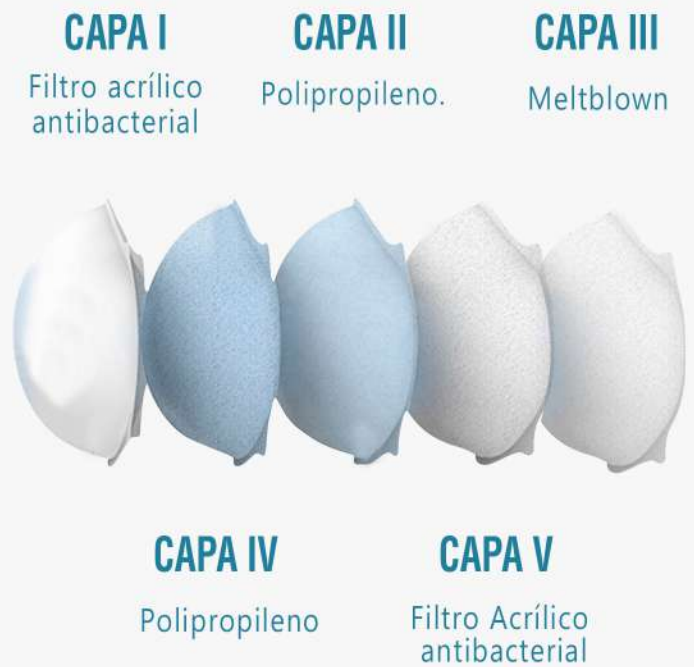

Posee 5 capas de tela no tejida con filamentos continuos de Polipropileno. Están compuestas por poliamida y poliéster

INSTRUCCIONES DE USO



1. Tomar la parte ancha de la mascarilla en la palma de su mano con la parte angosta tocando sus dedos. Las cintas deben estar por debajo de su mano.
2. Colocar la parte ancha de la mascarilla por debajo de su barbilla o mentón, cubra la nariz con la parte angosta.
3. Jalar la cinta elástica inferior hacia atrás del cuello, luego jalar la cinta superior más larga hasta detrás de su cabeza.
4. Ajustar su mascarilla de una manera cómoda y asegurar que quede apretada.

RECOMENDACIONES

- 1- Lavarse las manos antes de colocarla y quitarla.
- 2- No usarla en zonas donde corra aire con gases anestésicos o vapores esterilizantes.
- 3- Puede causar alguna reacción alérgica a personas intolerantes al látex.





SafeShield

 [SAFESHIELD.COM.PE](https://safeshield.com.pe)

 970 339 313 

 info@safeshield.com.pe

INDUSTRIA PERUANA